

注意事項：

- ・本マニュアルに従って作業しても専用アプリケーション(以後、viewphii 64 アプリケーション)のインストールが完了しない場合、販売店までご連絡ください。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
取扱説明書は、viewphii 64 アプリケーション内で参照できます。
また <https://viewphii.com/download64/> からダウンロードすることができます。
- ・必須要件に適合した PC をご使用ください。(※1)
- ・viewphii 64 アプリケーションの起動中は、無線のネットワーク設定は viewphii 64 に最適化しているため、その他の無線ネットワークに接続することはできません。
詳細は、取扱説明書の「プローブとアプリケーションの接続」を参照してください。


(※1) PC の必須要件：


OS	: Windows 10 64bit / Windows 11
CPU	: Core i5 (Intel 第 10 世代以降) 以上
メモリ	: 8GB 以上
ストレージ	: 128GB 以上
通信機能	: IEEE802.11a/b/g/n
エミッション規格	: CISPR32 適合相当
安全性	: IEC60950-1 適合相当

推奨機種については <https://viewphii.com/download64/> を参照してください。

■PC 設定


viewphii 64 アプリケーションとプローブは無線接続(Wi-Fi)するため、PC の Wi-Fi 設定を ON にします。
また、Wi-Fi 2.4GHz 帯を使用する場合、Bluetooth は OFF にすることを推奨します。

1. Windows メニューから設定  をクリックします。
2. ネットワークとインターネットをクリックします。

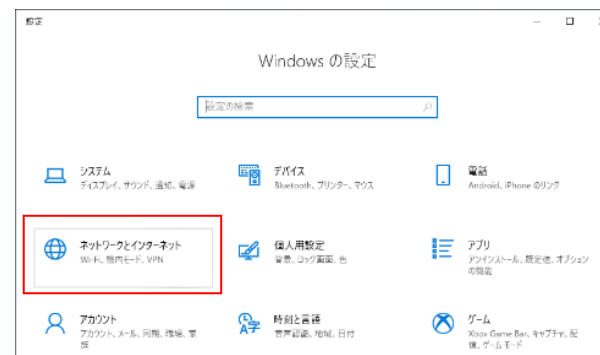

3. 機内モードで Wi-Fi をオン、Bluetooth をオフにします。

追加で無線 LAN アダプタをご使用の場合は、Wi-Fi 2 もオンにしてください。

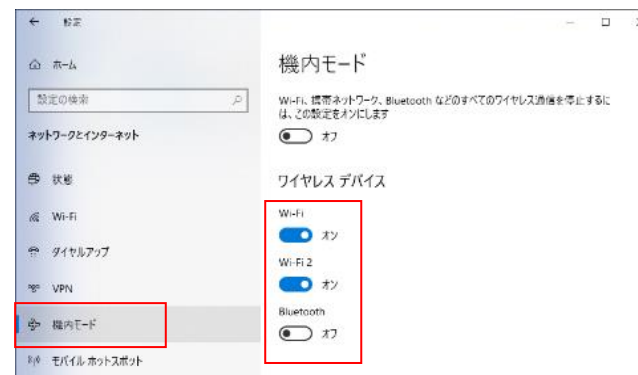


■インストール方法


1. 下記のサイトから viewphii 64 アプリケーションの.zip ファイルをダウンロードします。

<https://viewphii.com/download64/>

2. ダウンロードした.zip ファイルを任意の場所に展開します。

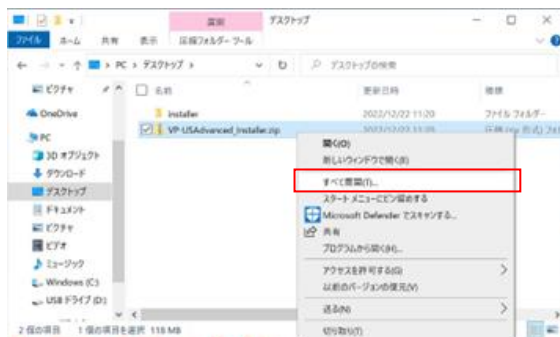

3. 展開したフォルダ内のインストーラー.bat ファイル(VP-Viewer_install.bat)をダブルクリックします。

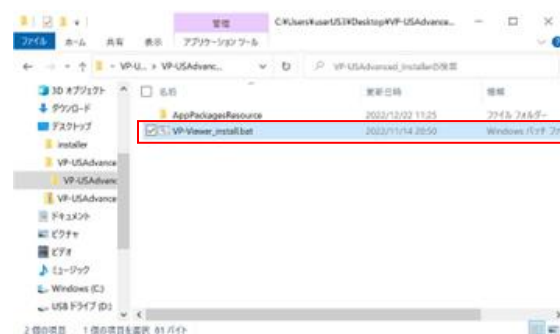

4. 下記画面が表示された場合は、「いいえ(N)」を押下します。




下記画面が表示された場合は、Enter キーを押下します。



5. 下記画面が表示された場合は、「はい」を選択します。




※誤って「いいえ」を選択した場合、以下のエラーメッセージが表示されます。

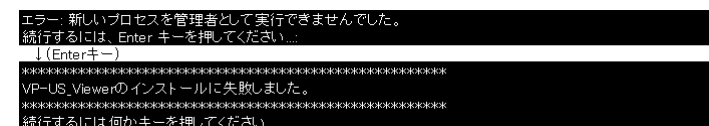

手順 3 からやり直してください。

6. 下記画面が起動したら、開発者用モード設定を「オン」とし、確認画面で「はい」を選択します。

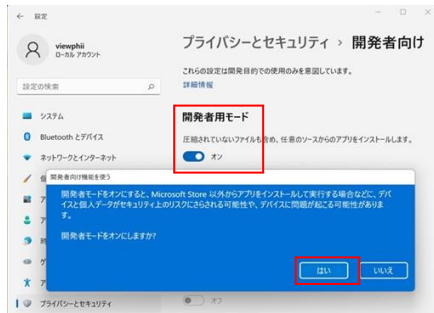


7. 下記画面が起動したら、「y」を入力し、Enter キーを押下します。


※本作業は、手順 6 の作業後に実施してください。

手順 6 の作業前に実施し、「インストールに失敗しました」と表示された場合は、

手順 6 を実施後に、手順 3 からやり直してください。

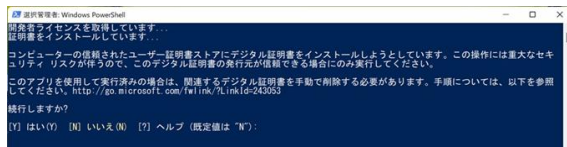

8. コマンドプロンプトが起動し、「成功：アプリは正常にインストールされました」と表示されたら、Enter キーを押下します。

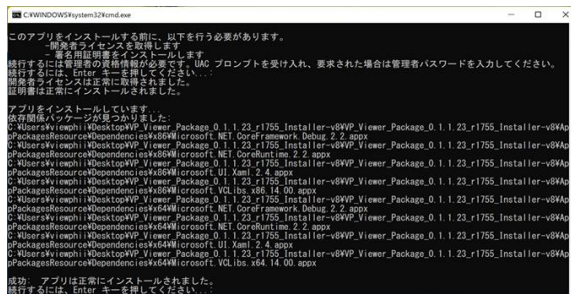

9. 下記画面が表示された場合は、「はい」を選択します。



10. 以下が表示された場合は、「ライセンス条項および使用条件に同意する(A)」にチェックをして、インストールボタンを押下します。



11. 下記画面が表示された場合は、「はい」を選択します。



- 1 2. 以下が表示されれば、インストールが完了となります。

「閉じる」を押下します。


インストール完了後、再起動を求められる場合があります。

その際は、再起動してください。



- 1 3. デスクトップ上に下記のショートカットが生成されています。

このショートカットから viewphii 64 アプリケーションを起動できます。

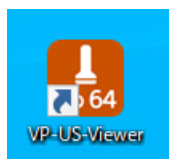

viewphii 64 アプリケーションのインストールは以上です。


■プローブの登録

初めて viewphii 64 アプリケーションを起動した場合、viewphii 64 アプリケーションにプローブを登録（ライセンス有効化）する画面が表示されます。


以下の手順に従って、プローブを登録（ライセンス有効化）してください。

1. 登録するプローブの電源ボタンを長押しして、電源を ON にします。

しばらくすると、プローブ一覧に該当のプローブが表示されます。

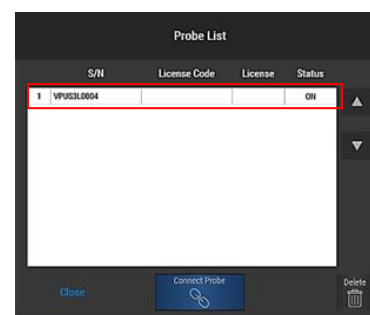

2. License Code 欄をクリックして、ライセンスコードを入力してください。

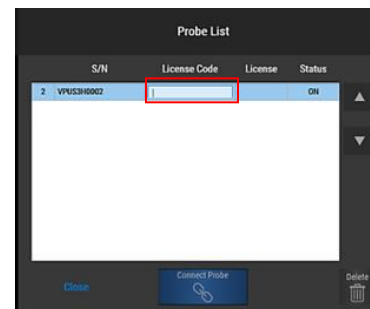

ライセンスコードは、販売店にお問い合わせください。

3. License 欄に Success と表示されれば登録（ライセンス有効化）完了です。

「Close」を押下してください。